

パルミコート タービュヘイラー を使用される患者さんへ

- この薬は喘息発作を起こさないようにする薬です。
(喘息の発作をしずめる薬ではありません。)
- 使用後は必ずキャップ(カバー)を閉めて保管してください。
- 室温で湿気の少ない場所に保管してください。
- 吸入口が汚れた場合は、乾燥した布などで拭いてください。
- 使用中に分解しないでください。
- 水洗いしないでください。

用法・用量 先生が指示した「用法・用量」を厳重に守ってください。

朝 吸入、夕 吸入


服薬終了日 服薬終了日を過ぎたら、新しい薬を使用してください。

月 日 ()


製品の種類と吸入回数

- パルミコート®100µgタービュヘイラー® 112吸入：112回吸入可能
- パルミコート®200µgタービュヘイラー® 56吸入：56回吸入可能
- パルミコート®200µgタービュヘイラー® 112吸入：112回吸入可能

薬の残量・終了のめやす

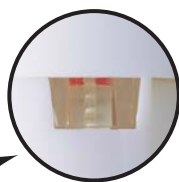

残り約20回分

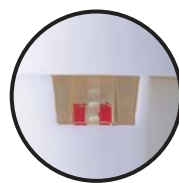

終了

吸入器の小窓の
上端に赤い印が
見え始めたら、**残り約20回吸入**
することができます。
この赤い印は、茶
色のグリップを回
すごとに少しずつ
下へ移動します。

赤い印が小窓の
下まできたら**使用
しないでください。**

赤い印が下まできても回転グリップは回転しますが、赤い印はそれ以上進みません。また、吸入器を振ると音が聞こえますが、これは内部に入っている乾燥剤の音です。

パルミコート タービュヘイラーの吸入方法

注意: 新しい薬剤を開封し、初めて使用する時に限り、写真②「クルッ」写真③「カチッ」の手順を2回繰り返してから、3回目に吸入してください。次回の吸入時からは下記の手順で吸入ができます。
1回に吸入する薬の量はごくわずかです。**薬を吸った感じはしませんが、正しく操作すれば吸入できています。**指示された回数以上吸入しないでください。



1 キャップを回して外します。



2 吸入器をまっすぐに立て、茶色の回転グリップを「クルッ」と写真の矢印の方向に**確実に止まるまで**回します。



3 写真の矢印の方向に「カチッ」という音がするまで戻します。この音は1吸入分の薬剤がセットされた合図です。

注) 茶色の回転グリップを何回まわしても薬は1吸入分しかセットされません。必要以上に回さないでください。



4 薬剤を吸入する前に息を吐きます。
注) マウスピースに息を吹きかけないでください。



5 息を吐いたらマウスピースをくわえ、薬を深く「スーッ」と力強く吸い込みます。その後、マウスピースから口を離してゆっくり息を吐きます。

注) 吸入する際は、本体を握らず、回転グリップを片手で持ってください。(空気取り入れ口をふさぐと、正しく吸入することができません。)

さらにもう1回吸入する場合、写真②～③の手順を繰り返してください。



6 吸入が終わったらキャップを閉めます。最後にうがい、または口をすすぎます。

吸入するときの注意点



吸入する際は、本体を握らず、回転グリップを片手で持ってください。
(空気取り入れ口をふさぐと、正しく吸入することができません。)
(右写真⑥参照)